

Tissue-Tek® Glas™ Coverslips

Til brug Tissue-Tek® Glas™ Coverslippers

24x50 mm

REF 6416

【Tilsligtet formål】

Dette produkt bruges som dækglass på et objektglas, der indeholder en vedhæftet sektion af formalinfikserede og paraffinindlejrede (FFPE) prøver eller cytopatologiske prøver for at beskytte prøven mod mekaniske kræfter eller miljøpåvirkning og observere objektglasset under lysmikroskop med henblik på mikroskopisk undersøgelse. Dette produkt bruges med et monteringsmedium, som placeres over prøven med henblik på fastgørelse af dækglasset til objektglasset.

【Tilsligtet bruger】

Person, der arbejder inden for patologi, anatomi eller klinisk cytologi med grundlæggende kendskab til deres respektive område (f.eks. patolog, medicinsk laborant), og som er ansvarlig for forberedelse af objektglas.

【Materialer som er påkrævede, men ikke medfølger】

Mikroskopobjektglas, monteringsmedium

【Anvendelse】

- Fjern plastikdækslet fra holderen.
- Fjern skum.
- Placer holderen på dækglassets indsætningsposition.
- Skub hakket ind i den rigtige åbning.
- Placer holderen fladt på dækglass-indsætning

【Forholdsregler for brug】

- Brug handsker for at forhindre snit forårsaget af glassets kanter.
- Hvis der dannes støv eller materiale spredes på grund af brud eller bortskaffelse, skal du bære en støvtæt maske (certificeret ved national test) for at forhindre indånding, beskyttelsesbriller og beskyttelseshandsker.
- Undgå berøring med våde hænder, for glassene vil klæbe til hinanden.
- Undgå at holderen kommer i kontakt med organiske opløsningsmidler, da de vil smelte holderen.
- For installation af glas henvises der til betjeningsvejledningen til den enhed, der skal bruges sammen med dette produkt.

【Sikkerhedsforanstaltninger】

- Hvis man får det i øjet: Hvis der kommer støv ind i øjet, skal man straks skylle med rindende vand og kontakte lægen.

- Hvis man får det på huden: Tør forsigtigt af uden at beskadige huden. Kontakt en læge, hvis der er opstået skader eller udslet.
- Indtagelse: Fjern eventuelle rester i munden, og søg straks læge.
- Indånding: Hvis der indåndes støv, skal man gurgle. Hvis man fortsat oplever kløe, smerte eller ubehag i næse eller hals, skal man kontakte en læge.

【Betingelser for drift og opbevaring】

- Undgå direkte sollys og steder med høj temperatur/høj luftfugtighed. Opbevares indendørs på et sted med tilstrækkelig naturlig ventilation.
- Når holderen i enheden er fjernet fra enheden, skal den opbevares med det originale dæksel.

【Udløbsdato】


- Udløbsdatoen er trykt på pakken.

【Bortskaffelse】

- Bortskaffes via et renovationselskab eller bortskaf dem i overensstemmelse med gældende lokale regler.

【Forholdsregler】

Nedenstående er et piktogram, som advarer om silicastøv, når der dannes glasstøv.

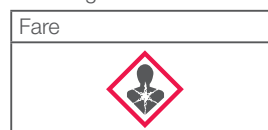

- Kan forårsage kræft.
- Potentiel skade på åndedrætsorganerne eller nyrerne kan opstå ved indånding af fint støv i store mængder over lange perioder.

【Specifikationer】

200/holder; 5/ boks

【Bemærk】

Hvis der indtræffer alvorlige hændelser, der er opstået i forbindelse med udstyret, skal det rapporteres til producenten og de kompetente myndigheder.

Dette er en engangsenhed, så den er ikke beregnet til genbrug.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd., 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
EC REP	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
CH REP	MedNet SWISS GmbH Bäderstrasse 18, 5400 Baden, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands Sysmex Suisse AG Todistrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Fremstillet i Japan	



Besøg vores hjemmeside

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.eu

