

Tissue-Tek® Coverslipping Film

Gebruiksaanwijzing

REF 4770-E

Tissue-Tek® Coverslipping Film is een folie die uitsluitend bedoeld is voor gebruik met Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Beoogd gebruik

Dit product wordt gebruikt om een monster af te dekken op een objectglaasje als fysieke barrière tegen mechanische krachten of blootstelling aan de omgeving. Het te beschermen monster kan een in formaline gefixeerd en in paraffine ingebed (FFPE) gedeelte, bevroren gedeelte of cytologiemonster zijn op een objectglaasje. De adhesie wordt geactiveerd door een actuator en als de lijm is gedroogd, kunnen de afgedekte objectglasjes worden gebruikt voor microscopische evaluatie, scanning of transport. Dit product kan, indien gewenst, worden verwijderd. Het is voor eenmalig gebruik en wordt gebruikt in de folie coverslipper.

Beoogde gebruiker

Dit product is bedoeld voor gebruik door getrainde professionals in klinische pathologie, anatomie of cytologie, getraind in het gebruik van de Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Hoe te gebruiken

- Dit product gebruikt uitsluitend xyleen als actuator.
- Dit product kan gebruikt worden op hydrofiele en hydrofobe objectglasjes.
- Laat de folie volledig acclimatiseren in de omgeving waarin deze gebruikt gaat worden. De verpakking van de folie moet 24 uur voorafgaand aan gebruik worden geopend om de folie te laten acclimatiseren.
- Gooi de eerste 80 cm folie weg voordat u een nieuwe rol op de coverslipper plaatst. Zo wordt het met plakband bevestigde vuile gedeelte verwijderd.
- Als de nieuwe rol is geplaatst, verwijdert u 3 tot 6 mm van de folie met behulp van het mes van het instrument.
- Aan het einde van de werkdag of als u die dag stopt met werken, haalt u de rol uit de coverslipper, wikkelt u de folie weer op de rol en doet u deze in de plastic zak om te voorkomen dat de folie bol gaat staan door de rol/rollen.
- Om folie te plaatsen en voor meer gebruikgegevens, raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van het apparaat dat samen met dit product gebruikt gaat worden.

Opmerking: Tijdens de laatste stappen van het kleuren van een monster, moet er altijd voor reagentia geschikt xyleen worden gebruikt om objectglasjes te prepareren voor afdekking.

De Coverslipping Film verwijderen

Deze folie kan aan de hand van de volgende procedure worden verwijderd.

1. Leg een met folie afgedekt objectglaasje 6 minuten lang in minimaal 50 ml aceton. Als u meerdere objectglasjes tegelijk verwerkt, laat u een beetje ruimte tussen de objectglasjes, zodat de folie op de objectglasjes niet in contact komen met elkaar.
2. Nadat de objectglasjes 6 minuten in aceton zijn geweekt, verwijdert u de folie met een pincet.
3. Doop de objectglasjes in en uit 2 batches xyleen (beide 50 ml) om resterende folie en lijm te verwijderen tot de witte troebelheid op het objectglaasje verdwijnt. 50 ml xyleen is voldoende voor maximaal 10 met folie afgedekte objectglasjes.

Opmerking: De objectglasjes kunnen opnieuw afgedekt worden met nieuwe folie.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Houd rekening met de omgeving waarin de folie wordt gebruikt en opgeslagen, aangezien aantasting van de folie tot verkeerd afgedekte objectglasjes kan leiden.
- Gebruik geen folie die niet volgens de specificaties is opgeslagen.
- Controleer voorafgaand aan gebruik in een objectglasjesscanner of het oppervlak van het objectglaasje is uitgedroogd.
- Controleer objectglasjes om variaties in dikte te verminderen en/of beperken. De dikte van cytologiemonsters kan enorm verschillen. Er kunnen belletjes ontstaan waardoor de monsters na opslag lastig te onderzoeken zijn.

Veiligheidsmaatregelen

Draag handschoenen en een masker om blootstelling aan actuator (xyleen) te voorkomen.

Gebruiks- en opslagomgeving

Gebruik en opslag:
10 °C tot 30 °C (50 °F tot 86 °F), luchtvochtigheid 30% tot 70%.
Opslag van met folie afgedekte objectglasjes (aanbeveling):
20 °C tot 25 °C (68 °F tot 77 °F), luchtvochtigheid van minder dan 50%.

Uiterste gebruiksdatum

De uiterste gebruiksdatum staat op de voorkant van 1 doos en op de bovenkant van de verpakking van 1 rol.

Weggooiën

Besteed het weggooien uit aan een goedgekeurd afvalbedrijf of gooi weg in overeenstemming met de toepasselijke plaatselijke regelgeving.

Opmerking

Eventuele ernstige incidenten die zich voordoen als gevolg van het apparaat moeten aan de fabrikant, de gemachtigde vertegenwoordiger en de juiste bevoegde instantie worden gemeld.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd. 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödisstrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
Gemaakt in Japan	



In vitro diagnostisch medisch apparaat



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing



Breekbaar, met zorg behandelen



CE-markering



Niet opnieuw gebruiken




Tegen zonlicht beschutten



Droog bewaren



Temperatuurlimiet

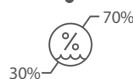

Maximale luchtvochtigheid

Bezoek onze website

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com
Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

