

Tissue-Tek® Coverslipping Film

Navodila za uporabo

REF 4770-E

Tissue-Tek® Coverslipping Film je folija, zasnovana za uporabo samo s folijami Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Predvideni namen

Ta izdelek se uporablja za prekrivanje vzorca na mikroskopskem stekelcu kot fizična pregrada pred mehanskimi silami ali izpostavljenostjo okoljskim vplivom. Vzorec, ki ga je treba zaščititi, je lahko del, fiksiran v formalinu in vgrajen v parafin (FFPE), zamrznjen del ali citološki vzorec na mikroskopskem stekelcu. Lepilo aktivira aktuator in ko se to posuši, se lahko prekrita stekelca uporabijo za mikroskopsko ocenjevanje, skeniranje ali transport. Po potrebi se ta izdelek lahko odstrani. To je pripomoček za enkratno uporabo, ki se uporablja v napravi za pokrivanje stekelc s folijo.

Predvideni uporabnik

Ta izdelek je namenjen uporabi s strani strokovnjakov, usposobljenih v klinični patologiji, anatomiji ali citologiji, ki so usposobljeni za uporabo folije Sakura Finetek Tissue-Tek Film®.

Uporaba

- V tem izdelku se kot aktuator uporablja samo ksilen.
- Ta izdelek se lahko uporablja na hidrofilnih in hidrofobnih stekelcih.
- Počakajte, da se folija popolnoma prilagodi okolju, v katerem se bo uporabljala. Embalažo folije odprite 24 ur pred uporabo, da se folija lahko prilagodi okolju.
- Zavrzite začetnih 80 cm folije, preden namestite nov zvitek na napravo za pokrivanje stekelc s folijo. Tako zagotovo odstranite poškodovano območje, ki je bilo prvotno pritrjeno z lepilnim trakom.
- Pri ponovni namestitvi odstranite od 3 do 6 mm folije z rezilom na rezalniku.
- Ko ob koncu delovnega dne ali po zaključenem delu odstranite zvitek z naprave za pokrivanje stekelc, navijte folijo nazaj na zvitek in shranite v plastični vrečki, da se ne bi folija ukrivila glede na valj(-e).
- Za namestitev filma in več podrobnosti glede uporabe glejte navodila za uporabo naprave, ki se uporablja skupaj s tem izdelkom.

Opomba: V zaključnih korakih barvanja vzorca mora biti za pripravo stekelc na pokrivanje s folijo vedno pripravljen čist ksilen, primerne kakovosti za reagent.

Odstranjevanje Coverslipping Film

To folijo lahko odstranite po naslednjem postopku.

1. Za 6 minut potopite stekelce s prevlečeno folijo v najmanj 50 ml acetona. Pri obdelavi več stekelc naenkrat pustite med njimi nekaj prostora, da se odlepljene folije na stekelcu ne dotikajo druga druge.
2. Ko so se stekelca 6 minut namakala v acetonu, odstranite folijo s pinceto.
3. Potopite stekelca v 2 različna pripravka ksilena (po 50 mL), da odstranite preostalo folijo in lepilo, dokler stekelce ni več belkasto motno. 50 mL ksilena zadostuje za do 10 stekelc s prevlečeno folijo.

Opomba: Na stekelca lahko ponovno nanesete novo folijo.

Previdnostni ukrepi za uporabo

- Opazujte okolje delovanja in shranjevanja, saj lahko pride do poslabšanje stanja filma in napak pri nanosu.
- Folije ne uporabljajte, če ni shranjena v skladu s specifikacijami.
- Pred uporabo v digitalnem bralniku stekelc preverite, da je površina stekelca posušena.
- Preverite stekelca, da zmanjšate in/ali omejite odstopanja v debelini. Citološki vzorci se lahko v debelini zelo razlikujejo. Lahko se tvorijo mehurčki, zaradi česar bo diagnostika vzorcev po shranjevanju otežena.

Varnostni ukrepi

Nosite rokavice in masko, da preprečite izpostavljenost aktuatorju (ksilen).

Okolje delovanja in shranjevanja

Delovanje in shranjevanje:

10 °C do 30 °C (50 °F do 86 °F), vlažnost od 30 % do 70 %.

Shranjevanje stekelc s prevlečeno folijo (priporočeno):

20 °C do 25 °C (68 °F do 77 °F), manj kot 50 % vlažnost.

Datum izteka uporabnosti

Datum poteka uporabnosti je natisnjen na sprednji strani 1 zaboja in zgornji strani embalaže z 1 zvitkom.

Odstranjevanje

Odstranite pri odobrenem podjetju za ravnanje z odpadki ali v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi.

Opomba

Če se je v zvezi s pripomočkom zgodil kakršen koli resen incident, je treba o tem obvestiti proizvajalca, pooblaščenega predstavnika in pristojni organ.

	Sakura Finetek Japan Co., Ltd. 31-1, Nihonbashi-Hamacho 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0007 Japan
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	MedNet SWISS GmbH D4 Platz 4, 6039 Root D4, Switzerland
	Sakura Finetek Europe B.V. Flemingweg 10a 2408 AV Alphen aan den Rijn The Netherlands
	Sysmex Suisse AG Tödisstrasse 50, 8810 Horgen, Switzerland
	Izdelano na Japonskem



In vitro diagnostični
medicinski pripomoček



Preglejte navodila za
uporabo



Krhko, ravnejte previdno



Oznaka CE




Ni za ponovno uporabo



Hranite stran od sončne svetlobe



Hranite na suhem

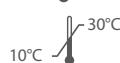

Temperaturna omejitev



Omejitev vlažnosti

Obiščite naše spletišče

Sakura Finetek Japan Co., Ltd. www.sakura-finetek.com

Sakura Finetek Europe B.V. www.sakura.com

