


■仕 様

一 般 名	カセットプリンタ	
商 品 名	ティッシュ・テック オートライトネクスト カセットプリンタUM	ティッシュ・テック オートライトネクスト カセットプリンタ
型 式	AWC-NU	AWC-N
本 体 寸 法	550 (W) × 655 (D) × 495 (H) mm (マガジン装着時: 990 (H))	480 (W) × 655 (D) × 410 (H) mm (マガジン装着時: 895 (H))
本 体 質 量	約42kg	約28kg
定 格 電 源	AC100V、50/60Hz	
定 格 電 流	7.0A	
定 格 電 力	700VA	
使 用 環 境	温 度: 15～35℃ 相対湿度: 30～85%RH (結露しないこと) 気 圧: 80kPa～106kPa	
セ ッ ト 可 能 量	カセットマガジンセット数 6本 カセットセット数 80個/マガジン	
使用可能カセット	ティッシュ・テック ユニ・カセット〈スタンダード〉、〈パイオブシー〉、〈パイオブシー〉シックス、プロカセット、固定・包埋用カセット	
プリントスピード	約15カセット/分 1カセット当たり12秒	

※機器の仕様は予告なしに変更することがあります。 「ティッシュ・テック®」[Tissue-Tek®]はサクラファインテックジャパン株式会社の登録商標です。

■標準付属品・消耗品

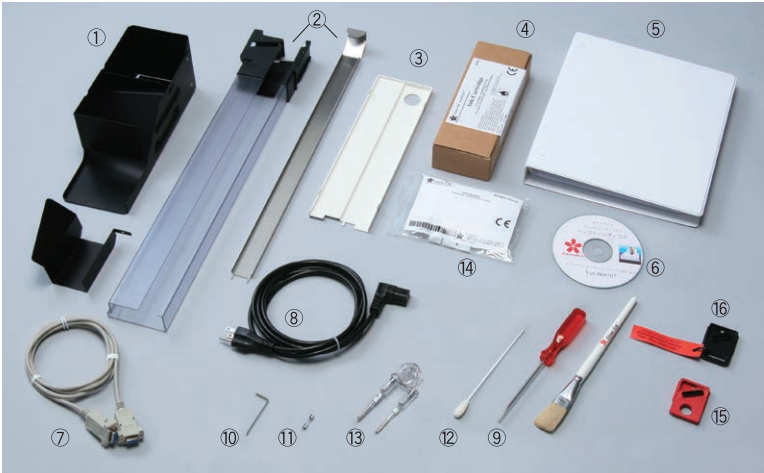

トランスポートカートリッジは本体に組み込まれております。

部 品 名	数 量
① カセットシュート	1個
② カセットマガジン	6本
③ カセットトレイ	10枚
④ インクカートリッジ	1本
⑤ 取扱操作説明書	1冊
⑥ オートライトプリンタユーティリティCD	1枚
⑦ シリアルプリンタケーブル	1本
⑧ 電源コード	3本
⑨ ドライバー (3×50)	1本
⑩ 六角レンチ (2.5mm)	1本
⑪ 交換用ヒューズ	2本
⑫ クリーニングロッド	1袋 (25本入り)
⑬ UVフラッシュランプ	1本
⑭ 紫外線吸収ガラス	2枚
⑮ シールデバイス	2個
⑯ トランスポートシールデバイス	2個

※インクカートリッジの販売はキット単位 (④、⑫、⑯) となります。

カセットプリンタUM用カセット

カセットマガジンへ簡単にセットすることができるテープ付きカセット

①箱から取り出しカセットマガジンにセット

②側面のテープを上からはがしたらセット完了

病理支援システム

CNA-Net「病理」(PT-10)

CNA-Net「病理」(PT-10)は、病理部門に必要な情報を記録・管理するシステムです。ティッシュ・テック オートライトネクスト カセットプリンタと併せてご使用下さい。

- 施設ごとに、適切なシステムをご提案
きめの細かい導入フォロー
- 組織診断システム、細胞診断システムなどをご用意
- 電子カルテとの連動に対応
- 一度入力したデータをフル活用する省力化仕様

※カセットのカラーおよび種類についてはお問い合わせください。

輸入・発売元

サクラファインテックジャパン株式会社

東京都中央区日本橋本町3-1-9
<http://www.sakura-finetek.com>

機器・消耗品に関するお問い合わせ
「サクラサポートライン」
☎ 0120-392-874

学術的なお問い合わせ
「病理の110番」
☎ 0120-155-390

注文・カタログ請求等のお問い合わせ
☎ 03-5643-2630



ウェブサイトで応援する
病理サポート体制をさらに充実!

病理標本のコールセンター「**病理の110番**」
☎ 0120-155-390

病理関連技術情報サイト「**標 本 道 場**」

ホームページ上において「病理の110番」や「標本道場」といったサポートコンテンツを設け、現場のさまざまな疑問・質問に対応しています。内容は、初級からベテランにいたるまで細かく網羅され、それぞれ必要に応じて活用することができます。さらに、新しい企画も進行中。御期待下さい。

<http://www.sakura-finetek.com>



L730.1812.1500.R3.D

カセット プリンタ

Tissue-Tek® AutoWrite™



ティッシュ・テック® オートライト™ ネクスト

カセット プリンタUM カセット プリンタ

有効なインシデント対策への解答！

Tissue-Tek® AutoWrite™

一步先の検体情報管理に 即戦力で応える！

標本作製のプロセスにおけるインシデント対策は、病理検査室の大きな課題となっています。カセットに記入される病理番号や患者氏名は、切り出し～スライド標本確認の全工程にわたって繰り返し行われる照合作業において、検体の識別を行うインシデント対策のキーとなります。カセット専用プリンタによる印字は、文字がクリアで分かりやすいためインシデント対策に最適です。さらに、“一步先の検体情報管理”を実現するためにカセットへの2次元バーコード印字を行うことにより、電子カルテや病理検査システムとの情報のリンクを可能にし、さらに確実性を増すことが可能となります。


鮮明な表示で運用を統一化し、 リスクマネジメントに貢献

プリンタによるカセット印字は、鮮明に見やすく印字され、スタッフがローテーションをしても印字精度を保ち続けることができます。検体の取り違えや誤記入、手書き文字の判読困難などを回避し、スムーズな作業を実現します。

処理能力の高さで作業効率をアップ

セット可能なカセット数は、カセットマガジン1本につき80個(最大6本：合計480カセット)、1分間に最大15カセットの印字スピードで、多数のカセットへ効率よく印字を行うことができます。また6本のカセットマガジンからランダムに選択し印字できるため、診療科別・検体別にカセットの種類や色を使い分けるなど、柔軟な使用法が可能です。

様々な印字例

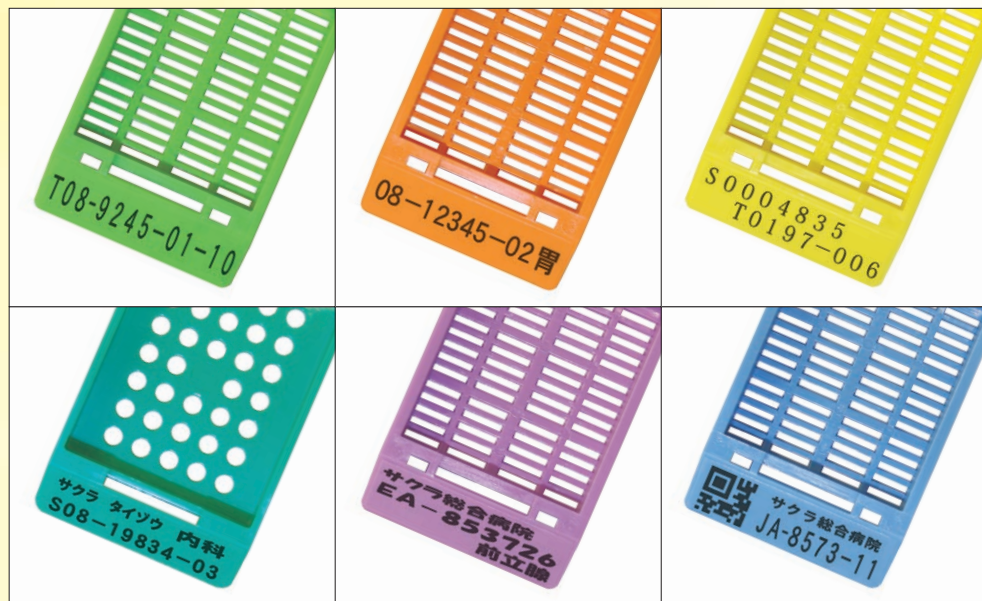

※原寸大


耐薬性に優れたインク

耐薬性に優れたインクですので、標本作製の工程で様々な薬剤に曝されても褪せません。長期保存する場合にも、鮮明な印字を保つことができます。

システムとのリンクを意識した 2次元バーコードの印字精度

通常のバーコードより情報量が多い2次元バーコード印字*に対応した印字精度を確保しているため、照合作業の効率化が実現します。さらに弊社の病理支援システムCNA-Net「病理」(PT-10)をはじめ、その他の既存もしくは導入予定のシステム等とリンクさせることで、検体のリアルタイムな処理情報と患者情報の連結を視野に入れることができます。

*「バーコード対応」は別ソフトが必要です。
2次元バーコードはマイクロQRを推奨します。

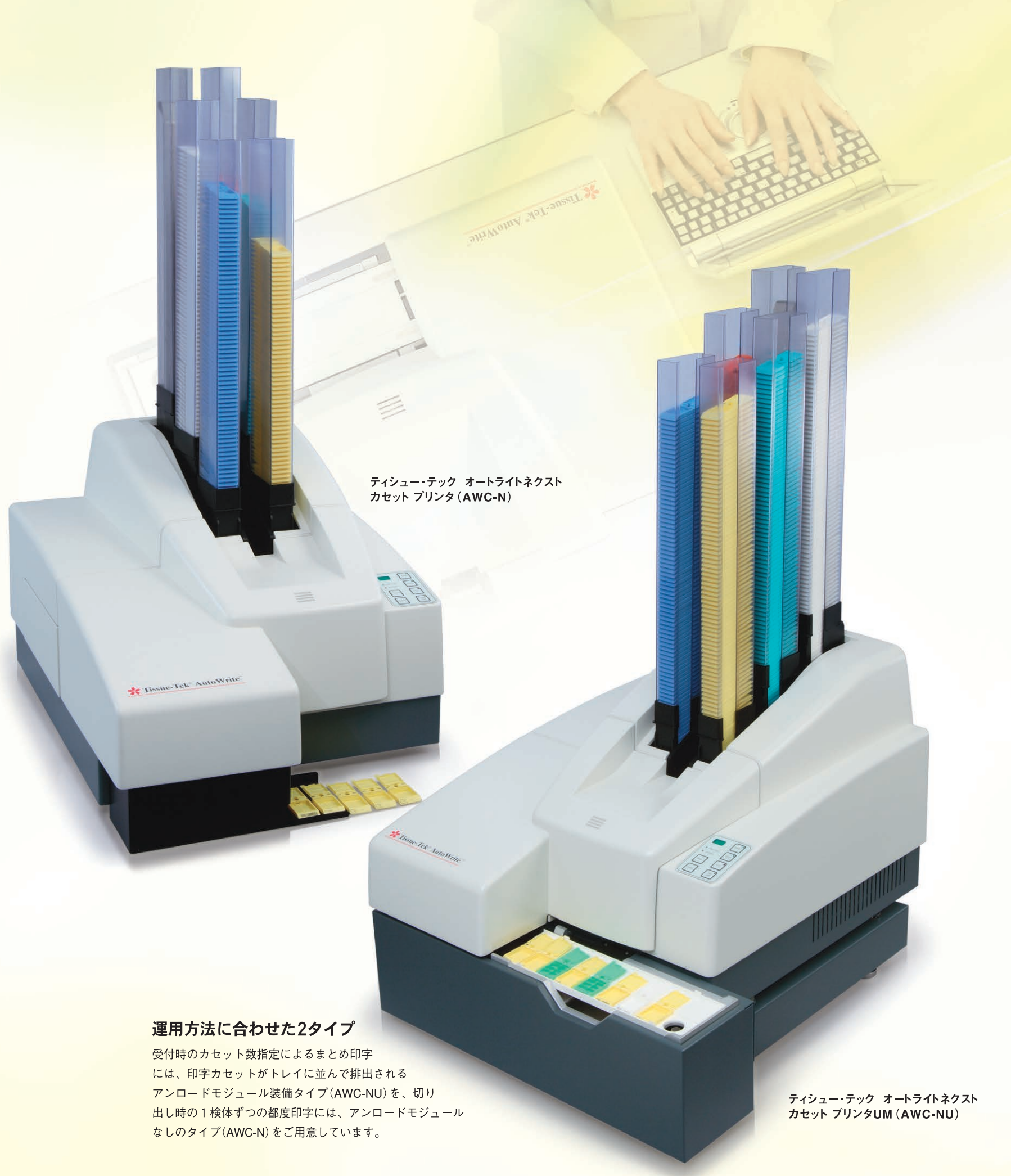

ティッシュ・テック オートライトネクスト
カセット プリンタ (AWC-N)

運用方法に合わせた2タイプ

受付時のカセット数指定によるまとめ印字には、印字カセットがトレイに並んで排出されるアンロードモジュール装備タイプ(AWC-NU)を、切り出し時の1検体ずつの都度印字には、アンロードモジュールなしのタイプ(AWC-N)をご用意しています。

ティッシュ・テック オートライトネクスト
カセット プリンタUM (AWC-NU)