



## サクラ 標本ブロック加湿器

### 標本ブロック加湿器



### 標本ブロック表面を加湿

- 薄切時に“息かけ”の必要はありません。
- ミストにて静電気を防止し、薄切切片を取りやすくします。

## 仕様

シリーズ名称	標本ブロック加湿器
一般的名称	検体前処理装置
販売名	サクラ 標本ブロック加湿器
型式	SMB-1
医療機器分類	一般医療機器 特定保守管理医療機器
製造販売届出番号	20B2X00014000021
JAN コード	4946433600225
本体寸法	130(W)×250*(D)×250(H)mm *送気管部含まず
本体質量	約5kg
定格電源	AC100V±10% 50/60Hz
消費電力	50VA
加湿方法	超音波による霧化方式
霧化能力	0~3mL/min 無段階調節式
送気	無段階調節式
霧化筒	80(φ)×107(H)mm
空焚防止装置	電極式水位制御
超音波周波数	1600~1720kHz

※機器の仕様は予告なしに変更する場合があります。

## 標準付属品

①本体	1台
②濾紙	7枚5セット
③ヒューズ(1A)	2本
取扱説明書	1冊
保証書・保証登録カード*	1枚




## 関連商品



### ティシュー・テック® フェザー® トラストーム

一般的名称：滑走式マイクローム  
医療機器分類：一般医療機器  
製造販売届出番号：21B2X10001073001  
製造販売業者：フェザー安全剃刀株式会社  
岐阜県美濃市松森 600-1

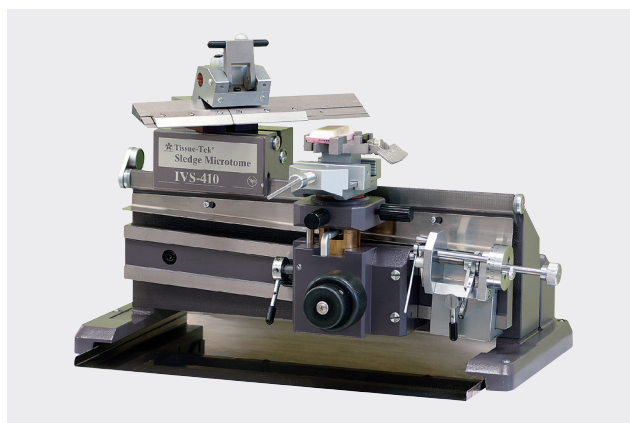

### ティシュー・テック® 滑走式マイクローム IVS-410

一般的名称：滑走式マイクローム  
医療機器分類：一般医療機器  
製造販売届出番号：11B3X00084000010  
製造販売業者：大和光機工業株式会社  
埼玉県朝霞市膝折町 2-14-43

販売業者

## サクラファインテックジャパン株式会社

東京都中央区日本橋浜町 2-31-1 浜町センタービル  
www.sakura-finetek.com

機器・消耗品に関するお問い合わせ  
「サクラサポートライン」  
☎0120-392-874

学術的なご相談  
「病理の110番」  
☎0120-155-390

注文・カタログ請求等のお問い合わせ  
☎03-5643-2630

病理関連技術情報サイト  
「標本道場」  
www.sakura-finetek.com

病理標本作製のウェットラボ  
LAB SQUARE  
ラボ・スクエア さくらほ



製造販売業者

## サクラ精機株式会社

長野県千曲市大字八幡 1122-8

